

1. Gå til linken som er vedlagt i eposten
2. Trykk på linken «CleanClickOnceCacheNet48.exe»:

**Name:** WebMed (Testing Next)

**Version:** 31.3.3.3177

**Publisher:** WebMed EPJ

The following prerequisites are required:

- Microsoft .NET Framework 4.8 (x86 and x64)
- Edge WebView runtime
- .NET Desktop Runtime 6.0.2 (x64)

If these components are already installed, you can [launch](#) the application now. Otherwise, click the button below to install the prerequisites and run the application.

[Install](#)

Dersom du opplever problemer med å installere WebMed, kjør denne før du prøver på nytt igjen

[CleanClickOnceCacheNet48.exe](#)

3. Åpne filen:

**Name:** WebMed (Testing Next)

**Version:** 31.3.3.3177

**Publisher:** WebMed EPJ

The following prerequisites are required:

- Microsoft .NET Framework 4.8 (x86 and x64)
- Edge WebView runtime
- .NET Desktop Runtime 6.0.2 (x64)

If these components are already installed, you can [launch](#) the application now button below to install the prerequisites and run the application.

[Install](#)

Dersom du opplever problemer med å installere WebMed, kjør denne før du pr [CleanClickOnceCacheNet48.exe](#)

WebMed EPJ Customel

CleanClickOnceCa...exe

- Åpne
- Åpne alltid filer av denne typen
- Vis i mappe
- Avbryt


4. Trykk «Mer info»

The screenshot shows a web page for 'WebMed EPJ' with a blue header. The page content includes:


- Name:** WebMed (Testing Next)
- Version:** 31.3.3.3177
- Publisher:** WebMed EPJ
- Prerequisites:**
  - Microsoft .NET Framework 4.8 (x86 and x64)
  - Edge WebView runtime
  - .NET Desktop Runtime 6.0.2 (x64)
- Text:** "The following prerequisites are required: If these components are already installed, you can [launch](#) the application now. Click the button below to install the prerequisites and run the application."
- Buttons:** An 'Install' button and a 'Mer info' button (highlighted with a red box).
- Footer:** "Dersom du opplever problemer med å installere WebMed, kjør denne før du prøver [CleanClickOnceCacheNet48.exe](#)" and "WebMed EPJ Customer Support".

Overlappende på høyre side er et Windows Security-vindue med tittelen "Windows beskyttet PC-en". Vinduet inneholder følgende tekst: "Microsoft Defender SmartScreen hindret en ukjent app i å starte. Kjøring av denne appen kan utsette PC-en for risiko." Under teksten er det et "Mer info"-knapp som er markert med en rød rektangel. I bunnen av vinduet er det en "Ikke kjør"-knapp.

5. Trykk «kjør likevel»:

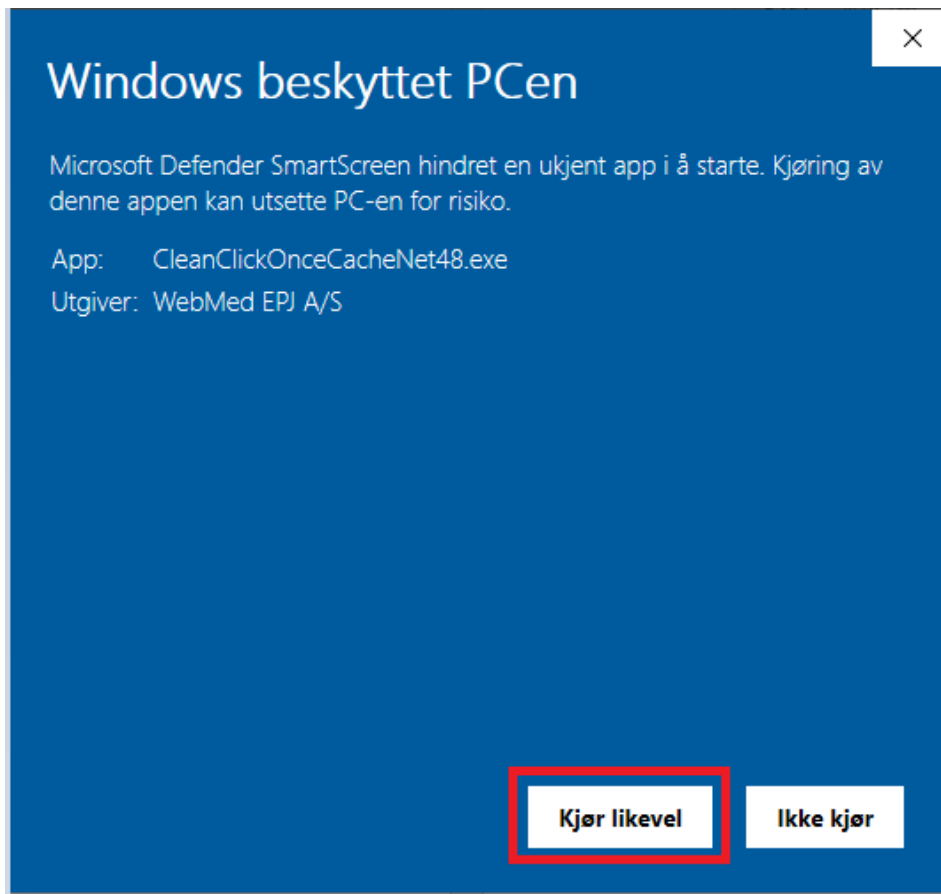

6. Trykk \*enter\* i vinduet som kommer opp:

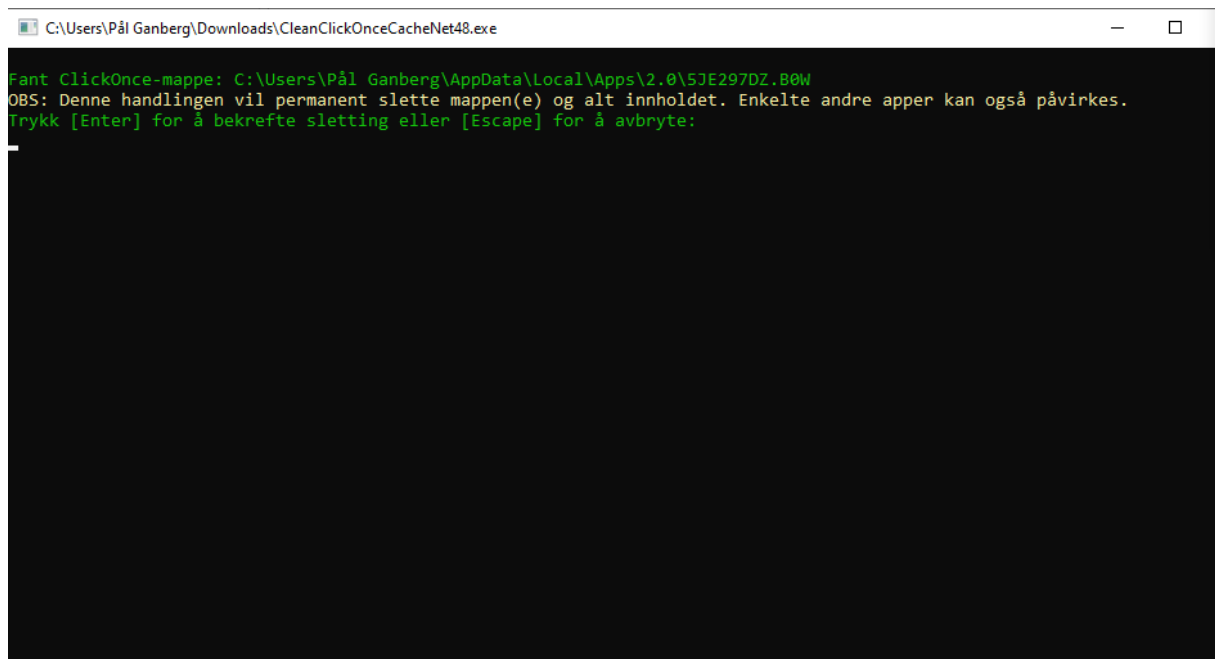

7. Lukk vinduet når du får teksten «Mappen er slettet»:

```
VelgC:\Users\Pål Ganberg\Downloads\CleanClickOnceCacheNet48.exe

Fant ClickOnce-mappe: C:\Users\Pål Ganberg\AppData\Local\Apps\2.0\5JE297DZ.B0W
OBS: Denne handlingen vil permanent slette mappen(e) og alt innholdet. Enkelte andre apper kan også påvirkes.
Trykk [Enter] for å bekrefte sletting eller [Escape] for å avbryte:

Mappen 5JE297DZ.B0W er slettet.
Oppretter ny koinfig-mappe ved å starte en ClickOnce app...
```

8. Last ned WebMed igjen ved å trykke på «launch»:

**Name:** WebMed (Testing Next)

**Version:** 31.3.3.3177

**Publisher:** WebMed EPJ

The following prerequisites are required:

- Microsoft .NET Framework 4.8 (x86 and x64)
- Edge WebView runtime
- .NET Desktop Runtime 6.0.2 (x64)

If these components are already installed, you can **launch** the application now. Otherwise, click the button below to install the prerequisites and run the application.

Dersom du opplever problemer med å installere WebMed, kjør denne før du prøver på nytt igjen  
[CleanClickOnceCacheNet48.exe](#)


9. Dersom du har sentralbord fra talkmore installert på arbeidsstasjonen vil du få følgende beskjed:

```
Vennligst avslutt følgende Apper før du fortsetter:

Prosess-ID: 55944, Navn: JournalSky.Sentralbord.stable.exe, Beskrivelse: JournalSky Pasientoppslag | Talkmore Bedrift Se
ntralbord | Innlogget som: Johannes Sjøkvist 48271670
Prosess-ID: 55152, Navn: JournalSky.Sentralbord.master.exe, Beskrivelse: JournalSky Pasientoppslag master | Talkmore Bed
rift Sentralbord

Trykk på en tast for å fortsette etter at du har avsluttet appene.
```

Får du denne beskjeden må du gå inn i sentralbordløsningen og avslutte programmet:

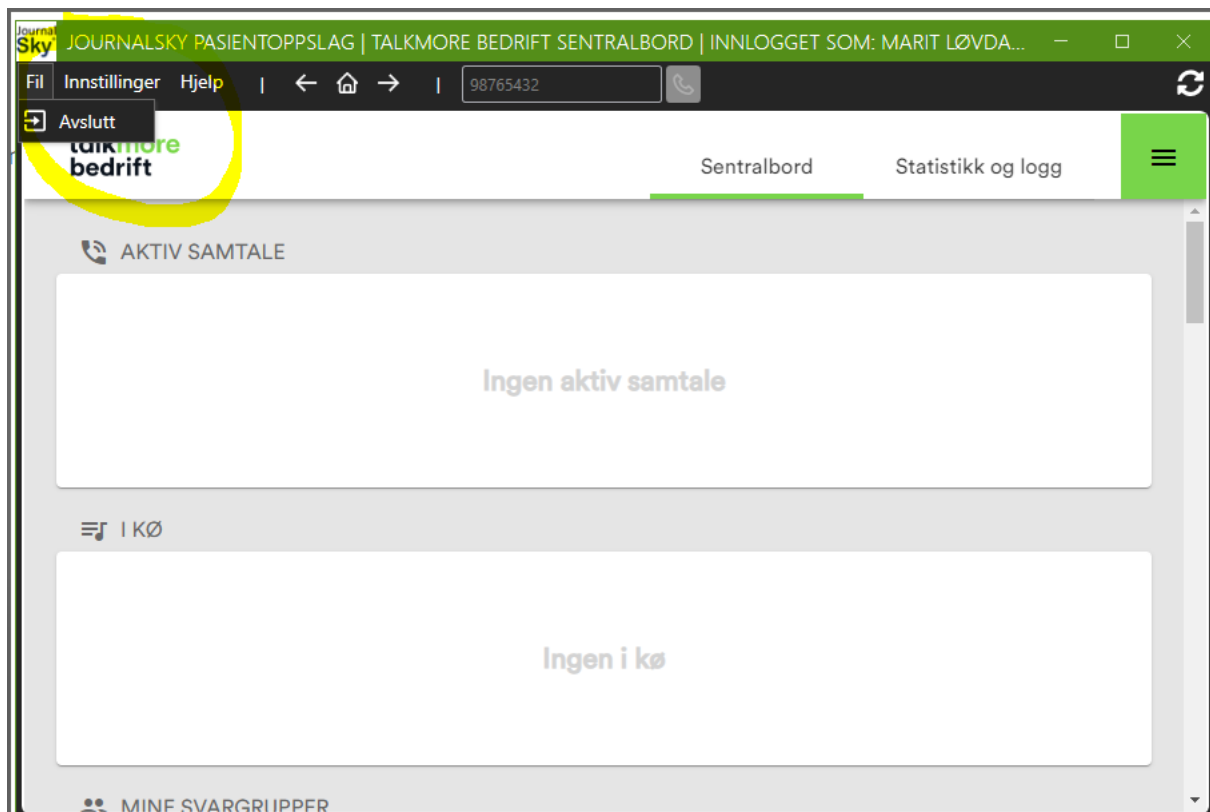

Etter at programmet er avsluttet gå tilbake til punkt 8 – «Launch»